

SPACE BABY 18.82AB



SPACE BABY silla eléctrica de tracción frontal para niños de 3 a 6 años de edad. Silla en dos tallas de asiento que pueden ser ajustados según su usuario acompañando su crecimiento (desde 280mm de ancho hasta un mínimo de 220mm, y de 340mm hasta un mínimo de 280mm). La profundidad se puede ajustar hasta 100mm. Los salva ropa laterales en aluminio, se pueden ajustar hasta 40mm cada uno, consiguiendo así la

reducción de la anchura del asiento. Respaldo con inclinación (0° a 25°) ajustable en altura hasta 80mm, abatible. Ruedas delanteras de tracción hinchables de Ø320mm, ruedas traseras hinchables de Ø200mm. Con 2 motores de 180w, 2 baterías de 35Ah sin mantenimiento. Reposapiés ajustable en altura y ángulo. Reposabrazos acolchados y ajustables en altura y ángulo (hasta 12°). Con ruedas anti-vuelco.

Características



Asiento ajustable en ancho

A través de los salva ropa




Asiento ajustable en altura eléctrico (opción)

Permite ajuste de 400 hasta 670mm



Reposabrazos abatibles

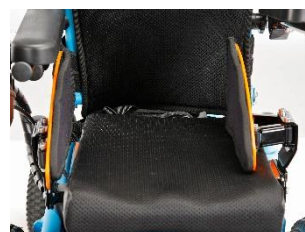

Salva ropa ajustables

Datos Técnicos

SPACE BABY 18.82AB

Fabricante: **Vassilli** | Referencia: 53 CD 7 EL SP BABY

Ancho asiento	340-280mm; 280-220mm	Color estructura	Rojo, verde, Amarillo, azul, gris, negro
Profundidad asiento	360-280mm; 300-220mm	Color tapicería	Negro
Altura asiento	400mm	Motor	180w
Altura respaldo	350-430mm; 300-380mm	Baterías	35Ah
Ancho silla	550mm	Autonomía	35Km *
Ancho silla cerrada	n/a	Velocidad máxima adelante	7Km/h *
Profundidad silla	820mm	Velocidad máxima atrás	3Km/h *
Profundidad silla sin reposapiés	720mm	Inclinación máxima	6° *
Altura reposabrazos	600-650mm	Altura máx. superar obstáculos	60mm
Altura silla	700-850mm	Rayo rotación	900mm
Reclinación	90° a 115°	Peso total silla	78Kg
Basculación / tilt	-	Peso sin comp. desmontables	-
Ruedas traseras	200mm	Peso máximo usuario	75Kg
Ruedas delanteras	320mm		

*en condiciones normales de piso y peso del Usuario | Tolerancia: +/-1cm

NOTA: en caso de divergencia el texto y la imagen prevalece la información descrita en el texto. Con el fin de mejora continua, Orthos XXI se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos sin previo aviso.

Update: 03/19

ORTHOSXXI, Unipessoal Lda Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia Briteiros // Guimarães // Portugal

ORTHOSMAIA XXI C/Manuel Nuñez, 2 3ª Planta // 36203 Vigo (Pontevedra) // España

Teléfono + 34 886 312 806 // Teléfono móvil +34 678 994 993 // Email comercialespana@orthosxxi.com // Web www.orthosxxi.com