



Cojín elevador SEAT ASSIST

ref: UL100

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cojines-elevadores/cojin-elevador-seat-assist>



El cojín elevador portátil que trasforma una silla o butaca en asiento elevador automático. SEAT ASSIST es un cojín auto propulsado (con la ayuda de un pistón hidráulico) que ayuda a sentarse y a levantarse con suavidad de una silla o butaca. Sin enchufes, pilas o ni cables. Ligero y portátil, ayuda a mantenerse independiente y activo.

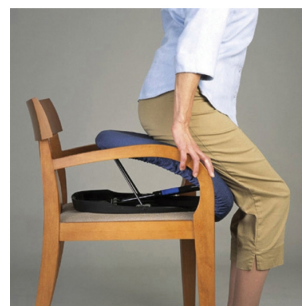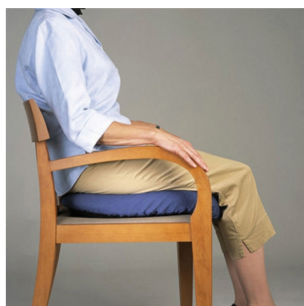

Para levantarse, sencillamente inclínese hacia delante con normalidad y empiece a levantarse; el pistón hidráulico del mecanismo de elevación se activa automáticamente y le levanta suavemente de la silla o butaca de manera estable y levantando hasta el 70% del peso.

Nota: Utilizar solamente en sillas o butacas que tengan al menos un reposabrazos para agarrarse. No se recomienda su uso en sillas de ruedas, automóviles, sillones reclinables o sillas de oficina con ruedas.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Ancho base	Fondo base
UL.100	43 cm	48 cm	38 cm	41 cm