



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# GAMA DE CAMAS *Dali*



## AD 969 DALI BLUETOOTH

Ahora con mando inalámbrico sin cables (bluetooth). Elegante y discreta cama combina con la mayoría del mobiliario. Altura graduable electrónicamente de 40 cm a 80 cm para facilitar la entrada y salida de la cama. Facilita el trabajo del cuidador y evita dolores y lesiones de espalda. Somier de 90 cm x 200 cm, de 4 planos accionados por motores para el máximo confort.



MANDO BLUETOOTH  
SIN CABLES

## APP DALI-LOCK PARA MÓVIL. BLOQUEO DE LAS FUNCIONES DEL MANDO



La cama Dali dispone de varias funciones para ajustar la posición del colchón. Pero a veces no es recomendable alguna posición debido a la patología del usuario.

Por ejemplo: si el cuidador quiere bloquear la función de Trendelenburg o para bajar el respaldo, nuestra aplicación **Dali-Lock** puede ayudar.

Esta aplicación funciona con Android o Apple. Se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones habituales totalmente gratuita.

### La aplicación Dali-Lock

- Descargue la aplicación Dali-Lock gratuita en su smartphone Android o Apple
- Inicie la búsqueda de cama. La aplicación encontrará la cama Dali.
- Sincronice su smartphone con la cama escaneando el código en la parte posterior del mando.
- Ahora puede bloquear o desbloquear cada una de las posiciones de la cama.

## POSICIÓN CONFORT

Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones (ver la televisión, comer, charlar con una visita,...). Esta posición es la mas parecida a estar sentado en un sillón y que en nuestras cama se adopta simplemente apretando un botón del mando.



**24 voltios en la cama**, la máxima protección para el usuario ya que todos los elementos a 230 voltios están fuera de la cama.



## AD 972 DALI ECON

Discreta y elegante cama de madera, con somier de lamas de madera de 90 cm x 200 cm. 4 planos para mayor comodidad del residente, y barandillas de madera para la prevención de caídas. Altura regulable de 32 cm a 72 cm aproximadamente. El respaldo, las piernas y la altura de la cama se regulan electrónicamente por motores.



IDEAL PARA PERSONAS BAJAS. TAN SOLO 32 CM DE ALTURA MÍNIMA DEL SOMIER



### Sistema Easy-Click

Las barandillas se pueden colocar o quitar de forma rápida y sencilla.

**Mando.** Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir el uso no deseado de todas o alguna de sus funciones



RANGO DE ELEVACIÓN A PARTIR DE 32 cm.



Dispone de un rango de regulación de altura del somier de 32 cm a 72 cm.

Su posición mas baja de tan solo 32 cm protege a los usuarios de lesiones por caída al mismo tiempo, su rango de elevación permite al cuidador trabajar en la cama en una posición mas cómoda, evitando lesiones de espalda.

### VENTAJAS

- Carga máxima de 185 kg.
- Freno de pie con tacto cómodo, puede ser accionado en zapatillas o calcetines .
- Posición confort de serie. Con solo accionando un botón.



## AD 973 DALI ECON LOW

Con sólo 22 cm de altura DALI ECON Low es la cama ideal para el cuidado diferenciado y libre de sujeciones, además es apropiada para personas de pequeña estatura y usuarios de silla de ruedas. Con somier de lamas de madera de 90 cm x 200 cm. 4 planos para mayor comodidad del residente



TAN SOLO 22 CM DE ALTURA  
MÍNIMA DEL SOMIER



**Las camas bajas**, se diseñaron originalmente para impedir el vagabundo nocturno de personas con demencia sin utilizar sujeciones ni encerrarlas tras unas barandillas.

**Mando.** Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir el uso no deseado de todas o alguna de sus funciones



### Sistema Easy-Click

Las barandillas se pueden colocar o quitar de forma rápida y sencilla.



## POSICIÓN CONFORT

Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones (ver la televisión, comer, charlar con una visita,...). Esta posición es la mas parecida a estar sentado en un sillón y que en nuestras cama se adopta simplemente apretando un botón del mando.



# ESPECIFICACIONES GAMA CAMAS DALI

## BARANDILLAS CON SISTEMA EASY-CLICK



Las barandillas laterales de seguridad se pueden colocar o quitar de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas con el nuevo sistema Easy-Click.



Freno de pie con tacto cómodo, puede ser accionado en zapatillas o con calcetines.

## ACCESORIOS



**A964** Trapecio de potencia



**A969-1** Cabezal o piecero cama Dali Bluetooth y Econ  
**A973-1** Cabezal o piecero cama Dali Econ Low




**A969-2** Funda tejido cabezal o piecero camas Dali

## DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

### VENTAJAS

- Carga máxima de 185 kg.
- Freno de pie con tacto cómodo, puede ser accionado en zapatillas o calcetines.
- Montaje más fácil y rápido con el sistema Easy-Click.
- Posición confort de serie. Con solo accionando un botón.

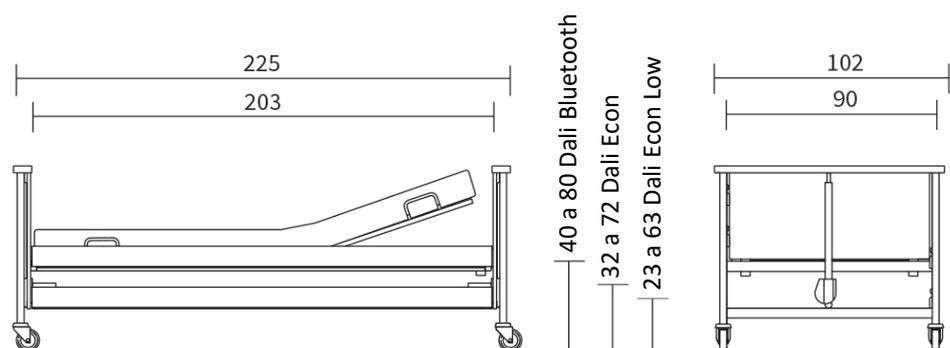

➔ Fácil de transportar y almacenar



**IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:**



**AyudasDinámicas®**

**AYUDAS TECNO DINÁMICAS S.L.**

Llobregat 12

Barcelona 08130

Tel. 93 574 74 74

Fax. 93 574 74 75

[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

[Info@ayudasdinamicas.com](mailto:Info@ayudasdinamicas.com)